


Cum se foloseste termometrul?

- 1 Apasati butonul Masurare "M" pentru a porni termometrul.




- 2 Apasati butonul „AGE” pentru a selecta diferite moduri de masurare a varstei. a. (0-3 luni); b. (3-36 luni); c. (36+ luni)

Nota: grupa de varsta implicata este de peste 36 de luni „1”.

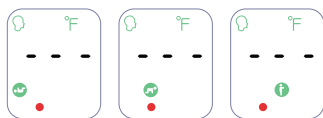

- 3 Pozitionati sonda termometrului de pe frunte si pastrati-o la 0-1,2 inchii (0-3 cm).

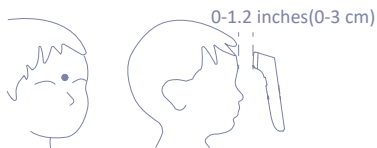


- 4 Apasati butonul Masurare "M", începe sa masori.



- 5 Cand se aude bip-ul, acum puteti citi valoarea.



- ⚠ Sonda este parte sensibila, trebuie protejata cu grija. Daca lentila sondei se murdareste, nu atingeti cu degetul sau alt obiect, în caz contrar, aceasta va afecta acuratetea valorii. Utilizati un tampon cu alcool sau un tampon de bumbac umezit cu alcool anhidru 75% pentru a curata carcasa termometrului si sonda de masurare.

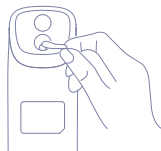

⚠ "---" tip


„---” înseamna esecul de masurare.

Cauza posibila este urmatoarea:

A. Distanța de masurare este mai mare de 1-3 cm (0,4-1,2 inchii).

B. Temperatura masurata este mai mica de 32°C (89.6°F).

* Nu utilizati modul frunte pentru a masura temperatura camerei/obiectului si trebuie sa asteptati pana cand sunetul se opreste complet înainte de a verifica valoarea temperaturii. modurile nu au fost rezolvate, va rugam sa contactati distribuitorul.

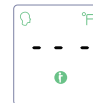

1 Modul Mute

Cand termometrul este pornit, apasati lung butonul „MEM” timp de 3 secunde pentru a comuta de la activare la sunet. (Setare din fabrica: modul de dezactivare a sunetului).

* Dezactivarea sunetului este doar un sunet sonor, nu o valoare de temperatura transmisa.



2 35 Sets of Memory Data

35 Seturi de date de memorie Cand termometrul este pornit, apasand scurt „Mem” pentru a trece la modul de memorie, apasati din nou acest buton „Mem” pentru a verifica cele 35 de seturi de memorii unul cate unul.

Daca nu exista valoare, va afisa „---”.

* Datele de memorie vor fi anulate la scoaterea bateriilor.

3 Luati temperatura camerei/obiectului

Cand termometrul este oprit, apasati butonul „Mem” mai mult de 3 secunde, apoi apasati butonul Masurare „M” pentru a masura camera/obiect. Tineti termometrul la aproximativ 0,4-1,2 inchii (1-3 cm) distanta de obiect.

Apasati butonul „M” în 1 secunda, cand se aude bip-ul, acum puteti citi valoarea.

* Opriti termometrul si porniti-l, apoi reveniti la modul frunte.



4 Conversie °C/°F

Cand termometrul este pornit, apasati lung butonul „AGE” timp de 3 secunde pentru a schimba °C/°F.

